


Esthetic Guide

# ОБАЛИК

Мужчина. Эстетика и особенности

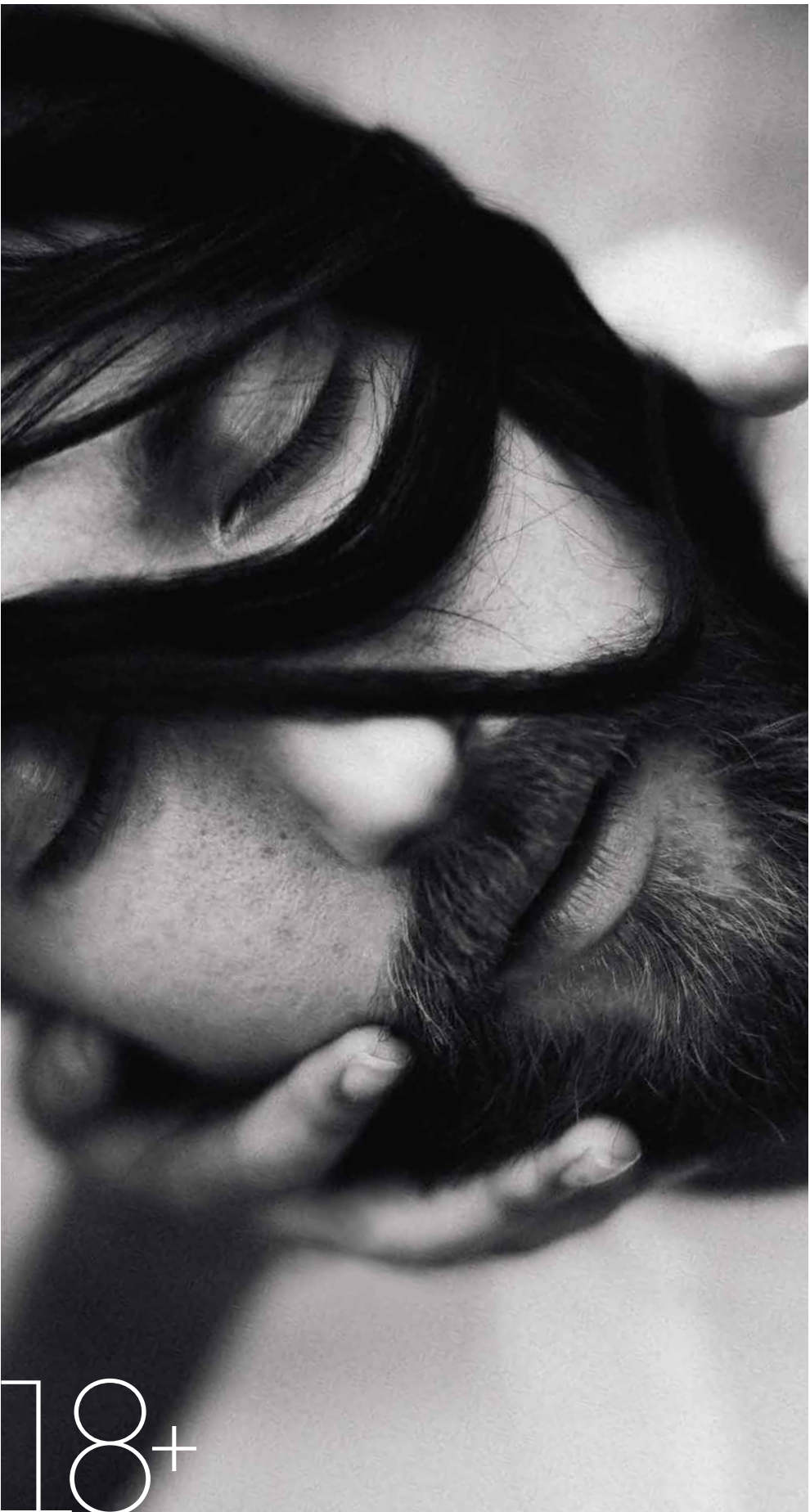

3 (47) 2022

18+



9 7724 12 493008



Елена Баранова

врач-дерматолог,  
косметолог, Москва

[premiuaesthetics](#)

# Geneo: методика аппаратного омоложения для мужчин

Мужчина в кабинете косметолога — зачастую самый сложный и требовательный клиент. Его потребности — комфорт, отсутствие реабилитации и комплексное воздействие на разные проблемные зоны, обеспечивающее хороший результат.

## Введение

Как известно, мужская анатомия, физиология и психология отличаются от женской. Это накладывает отпечаток и на подходы в проведении косметологических процедур, в том числе на проведение аппаратных процедур омоложения.

Мужчины предпочитают манипуляции, которые не оставляют следов, другими словами, не требующие реабилитации. Это связано с нежеланием раскрывать окружающим сам факт проведения процедуры, а также с некоторыми трудностями постпроцедурного ухода в зоне роста бороды.

Мужчины хуже, чем женщины, переносят боль и дискомфорт, особенно если боль длится долго. Они лучше запоминают болезненные ощущения и острее реагируют, когда им вновь приходится переживать боль, поэтому реже готовы к аппаратным процедурам, связанным с повреждением тканей, например, к лазерным шлифовкам, игольчатому RF-лифтингу, HIFU-терапии.

Мужчины в большей степени, чем женщины, предпочитают сочетание различных процедур и методик,

поскольку оно позволяет им сразу решить несколько проблем и сэкономить время. При этом они готовы тратить значительные суммы на комплексные процедуры, в отличие от женщин, которым удобнее лишь один раз посетить клинику или салон красоты.

## Материалы и методы

Практически все аппаратные методики являются универсальными, не существует аппаратов, разработанных специально для мужчин. Однако есть методики, которые больше подходят пациентам мужского пола, чем другие.

В частности, аппаратная методика омоложения и ухода за кожей Geneo хорошо соответствует их ожиданиям. В отличие от большинства глобальных аппаратных процедур, включая лазер, IPL, RF и ультразвуковую терапию, Geneo основана на идее комбинации нескольких факторов воздействия, каждый из которых максимально физиологичен и не подразумевает повреждения кожного покрова и разрушения тканей.

Большинство аппаратных методик работает **по принципу «трёх R»**: разрушение, регенерация, ремоделирование. Однако некоторые методики используют физиологические эффекты и задействуют ресурсы организма. К ним относится и Geneo.



Фото 1 . Аппарат Geneo

В стандартный протокол Geneo входит четыре этапа, в ходе которых на кожу воздействует шесть различных факторов.

**1 этап.** Воздействие TriPollar RF — контролируемый нагрев дермы и подкожно-жировой клетчатки под действием RF-энергии до температуры 41–43 °С. Радиочастотная энергия передаётся в кожу при помощи патентованной технологии Pollogen, равномерно распределяясь между четырьмя электродами. Это позволяет доставлять её на большую глубину без риска термического повреждения кожи, что важно для «мужских» процедур, поскольку кожа у мужчин толще, чем у женщин, и они меньше готовы терпеть боль.

**2 этап.** Неинвазивная оксигенация ОхуGeneo. Используются капсулы ОхуPod и праймер-гель на водной основе. Вещество капсулы взаимодействует с гелем и интенсивно выделяет углекислый газ, который проникает в кожу и ускоряет высвобождение кислорода гемоглобином. За счёт этого в коже повышается концентрация кислорода и увеличивается перфузия. Капсулы и гель содержат

биологически активные вещества, поэтому кожа активно питается.

Капсула ОхуPod также выполняет роль абразива, поэтому дополнительным эффектом процедуры становится эксфолиация, обеспечивая эффект сияния кожи.

**3 этап.** Сонофорез Ultrasound. Используются сыворотки Geneo, аппликатор с круглой площадкой диаметром 2 см, что позволяет проводить процедуру быстро и эффективно.

**4 этап.** Аппаратный массаж, в процессе которого аппликатор ОхуGeneo воздействует на покровные ткани в режиме вибрации, что позволяет улучшить лимфодренаж и оказывает рефлекторное расслабляющее действие на мышцы лица.

В ходе процедуры Geneo используются капсулы ОхуPod, праймер-гель и сыворотка. Все три средства содержат набор активных ингредиентов, дополняющих друг друга, и входят в набор Geneo. На сегодняшний день разработано пять процедурных наборов, каждый из которых решает свои задачи.

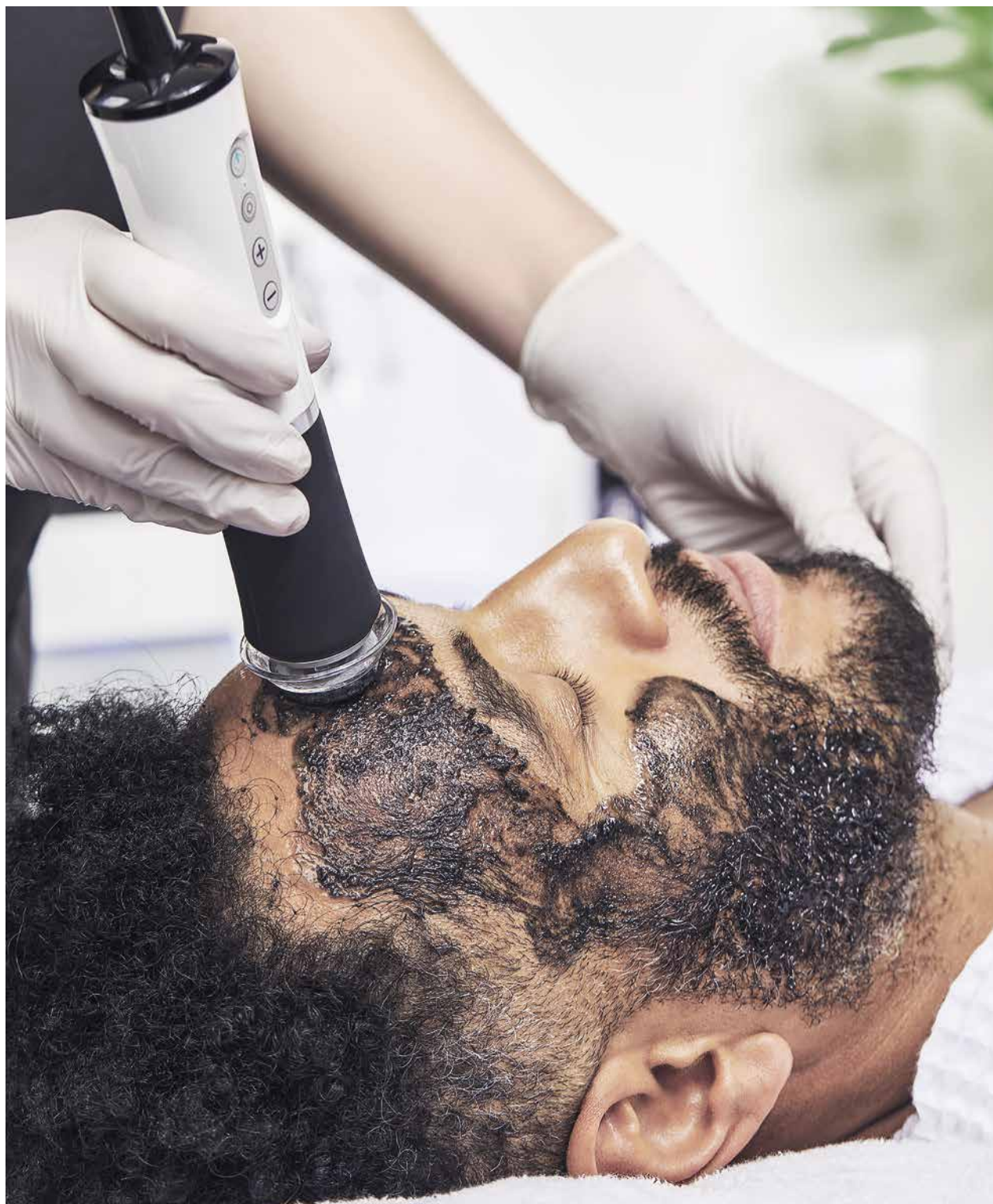


Фото 2. Этап ОxyGeneo процедуры Geneo, протокол Balance

Geneo Revive — для стареющей кожи, содержит ингредиенты, активирующие обновление тканевого матрикса.

Geneo Balance — для жирной кожи, содержит ингредиенты, восстанавливающие нормальное функционирование сальных желёз и уменьшающие продукцию себума.

Geneo Illuminate — для бережного осветления кожи, содержит активные ингредиенты с отбеливающим и омолаживающим эффектом.

Geneo Hydrate — для интенсивного увлажнения кожи и уменьшения трансдермальной потери жидкости.

Geneo Detox — для людей, живущих в условиях загрязнённой окружающей среды и желающих уменьшить её вредное влияние на кожу.

## Заключение

Процедуру Geneo можно назвать оптимально подходящей для пациентов-мужчин: она безболезненна, не оставляет следов на лице и не требует реабилитации, при этом комбинирует несколько факторов воздействия и обеспечивает за счёт этого хороший результат.

Geneo никак не влияет на рост волос на лице, более того, в большинстве случаев наличие волос не мешает проведению процедуры. Длительность процедуры Geneo — около часа. Поскольку это абсолютно комфортная процедура, многие мужчины любят её за возможность расслабиться и отдохнуть. ●



# geneo

Мультиплатформа для

- неинвазивной оксигенации
- RF-лифтинга
- ультразвукофореза
- аппаратного массажа



6 факторов воздействия  
за одну процедуру



омоложение без боли  
и реабилитации



персонализированные  
процедуры в любое  
время года



2 варианта  
комплектации – для клиник  
и для салонов красоты



**Закажите Geneo у эксклюзивного дистрибьютора и получите:**

- рекламные материалы для социальных сетей
- лендинговые страницы для записи клиентов
- более 700 файлов базы знаний Geneo
- бесплатное обучение персонала
- бизнес-тренинги и консультации экспертов

Узнайте  
подробнее



[premium-a.ru/geob](http://premium-a.ru/geob)



ООО «Премиум Эстетикс». Эксклюзивный дистрибьютор Lumenis, Solta Medical, Zimmer, Miravex, Pollogen, FotoFinder

Москва, проспект Маршала Жукова, 51 ☎ +7 (495) 988-21-87 🌐 [www.premium-a.ru](http://www.premium-a.ru)

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН2016/4077 от 11 мая 2016 г.