




Legend Pro+
Dare to imagine

RF-платформа 4 в 1

Создан для совершенства
ваших пациентов



LUMENIS ■ POLLOGEN ■ FOTOFINDER ■ SOLTA MEDICAL ■ ZIMMER ■ MIRAVEX

M22 ■ ACUPULSE ■ LIGHTSHEER ■ ULTRAPULSE ■ LEGEND PRO+ ■ DIVINE PRO ■ GENE0
VASER ■ FRAXEL ■ THERMAGE ■ CLEAR+BRILLIANT ■ Z LIPO MED ■ Z WAVE
ATBM BODYSTUDIO ■ HANDYSCOPE ■ VEXIA ■ STUDIO ■ ANTERA 3D



Legend Pro+

Dare to imagine

- 4 передовые технологии
- Ультрасовременный дизайн
- Продуманная эргономика

Legend Pro+ объединяет игольчатую, фракционную, неинвазивную радиочастотную терапию с технологией Динамической Мышечной Активации для воздействия на все слои кожи и SMAS.

Legend Pro+ — это инновационный аппарат для проведения различных эстетических процедур на лице и теле с целью ремоделирования и скульптурирования кожи и подкожно-жировой клетчатки, стимулирования SMAS, уменьшения локальных жировых отложений, RF-подтяжки лица, стимулирования регенерации тканей и многое другое.



TriPollar® RF

Контролируемый нагрев глубоких слоев дермы фокусированной RF-энергией для активации синтеза коллагена и эластина. Восстановление упругости и подтяжка кожи.




DMA™

Dynamic Muscle Activation — неинвазивная активация SMAS электрическим током в движении для достижения эффекта лифтинга. Стимуляция липолиза, восстановление тонуса и тренировка мышц с целью коррекции фигуры.




Hybrid Energy™

Малоинвазивная технология обновления тканей кожи под действием RF-энергии и гальванического тока, которые доставляются в ткани через ультратонкие электроды. Создаваемые микроканалы RF-абляции запускают процесс ремоделирования, а гальванический ток стимулирует быстрое заживление и образование новой здоровой кожи.

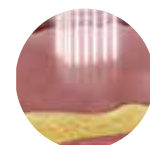

TriFractional™

Фракционный способ подачи RF-энергии через точечные контакты, размещенные на пластине наконечника, позволяют создавать контролируемую абляцию на поверхности кожи и объемный нагрев дермы. Результат такого воздействия — обновление эпидермиса, выравнивание цвета и текстуры кожи.

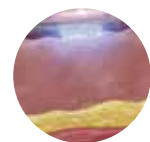

4 рукоятки и 4 технологии

Все возможности RF в одном аппарате



Рукоятка Hybrid Energy с самыми тонкими иглами на рынке для технологии Hybrid Energy и TriFractional.

Рукоятки TriPollar для технологии TriPollar и DMA



Используемые технологии применяются как отдельно, так и в составе комбинированных протоколов, каждый из которых построен на принципах синергии и увеличения эффективности.

- ✔ **Legend Lift** (TriPollar+DMA). Объединение 2 различных энергий направлено на усиление и стимуляцию кровообращения, оксигенацию и лимфодренаж. Применяется для лечения целлюлита, где данная процедура тонизирует и контурирует область ягодиц, обеспечивая гладкий и плотный внешний вид; используется для контурирования области живота путем ускорения естественного жирового обмена и стимуляции мышц, а также для подтяжки свободной кожи живота. С помощью **Legend Lift** лица возможно проведение безоперационного лифтинга и подтяжки лица, обновление естественного коллагена и эластина, уменьшение линий и морщин.
- ✔ **Legend M2** — сочетает в себе предварительный объемный нагрев тканей (Macro) с помощью TriPollar RF-энергии с последующим точечным нагревом (Micro) при помощи ультратонких электродов Hybrid Energy. Предварительный нагрев TriPollar RF приводит к усилению реакции кожи на воздействие Hybrid Energy за счет снижения импеданса тканей и увеличения вазодилатации. Процедуру **Legend M2** можно проводить на всей области лица и тела, за исключением чувствительных зон, таких как периорбитальная. Протокол **Legend M2** хорошо зарекомендовал себя в устранении дряблости кожи и уменьшении морщин, в улучшении текстуры кожи, уменьшении выраженности носогубных складок.
- ✔ **Legend Pyramid Facelift** (TriPollar+TriFractional) комбинирует направленный нагрев кожи лица с помощью TriPollar с последующим ремоделированием с помощью TriFractional. Протокол предназначен для неинвазивного RF-лифтинга лица, стимуляции естественного липидного обмена, приводящей к объемной потере подкожного жира, а также является относительной альтернативой лечению CO₂-лазером, т. к. приводит к абляции микрофрагментов эпидермиса и эффекту мягкого пилинга.
- ✔ **SmoothGlo** — сочетание использования IPL аппарата M22 (Lumenis) с микроигльчатый RF (Legend Pro+). IPL действует на поверхностные слои кожи, а микроигльчатый RF проникает в глубокие слои с помощью RF-энергии и гальванического тока. Комбинация методов приводит к разрушению меланина, коагуляции сосудов, стимуляции выработки коллагена и лифтингу кожи. **SmoothGlo** дает хорошие результаты при возрастных изменениях, корректирует пигментные и сосудистые дисхромии, улучшает текстуру кожи.
- ✔ **Fire and Ice** (Криолиполиз+Legend Lift). Использование протокола legend Lift после процедуры криолиполиза. Протокол нацелен на полноценный подход к контурированию тела: уменьшение жирового слоя с помощью аппаратного криолиполиза и использование протокола Legend Lift для лифтинга и ремоделирования кожи над обработанной областью.

Клинически проверенная технология

Обновление кожи за счет многоуровневого воздействия RF-энергии с добавлением динамической мышечной активации.



До

3 процедуры



До

6 процедур



До

2 процедуры



До

Сразу после 1 процедуры

Технические параметры Legend Pro+™

Параметр	Значение
Напряжение питания	100–240 В, 50/60 Гц, макс. 2,2 А
Рабочие модули и режимы	Hybrid Energy™, TriFractional™, TriPollar®, DMA™
Предустановленные параметры	Да
Максимальная выходная мощность RF	50 Ватт, 200 Ом
Максимальное выходное напряжение	100 ± 10 В
Выходная частота RF	1 МГц
Спецификация платформы	
Вес, кг	30
Размеры (Д x Ш x В), см	46x46x110

Аппликаторы TriPollar®

TriPollar®	Количество электродов	Температурный датчик
Аппликатор 1	6	Внутренний
Аппликатор 2	3	Внутренний
Аппликатор 3	3	Внешний

Аппликатор VoluDerm™

Наконечники VoluDerm™	Матрица игл	Длина игл
Gen 36	6x6	0,6 мм
Gen 12	6x2	0,6 мм
Gen 100	10x10	0,6 мм
Gen 36L	6x6	1,0 мм

Наконечники TriFractional™	Матрица пинов	Длина игл
H 7X7	7x7	0,2 мм